
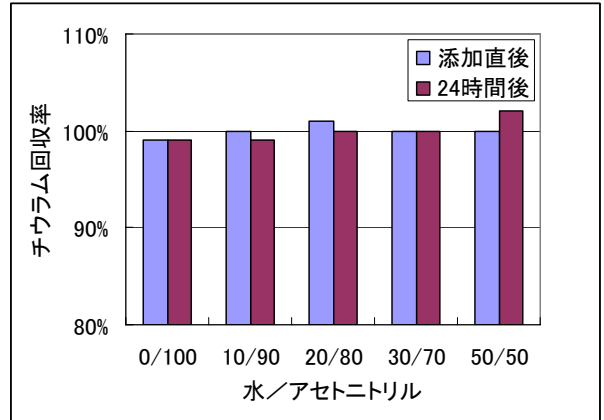


# チウラム用クリーンアップ多機能カートリッジ(2)

登録番号 ELB012

1. チウラム用クリーンアップ多機能カートリッジAutoprep<sup>®</sup> MF-1は水/アセトニトリル=50/50の溶液でもチウラムだけスルーして、妨害成分、色素を保持することができる  
⇒脱水が不十分な試料でも適用可能
2. 24時間後のチウラム量変化なし

## ■プロトコル

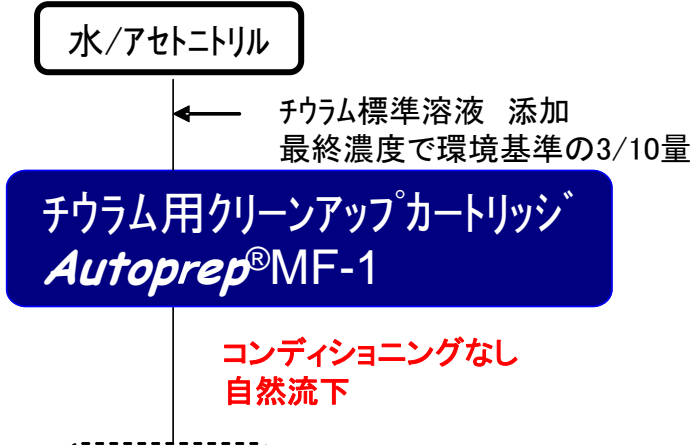

		チウラムの溶解溶媒(水/アセトニトリル混合溶液)				
		0/100	10/90	20/80	30/70	50/50
回収率	添加直後	99%	100%	101%	100%	100%
	24時間後	99%	99%	100%	100%	102%